Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

Miele

APFD 210

hu Flaschenkorb
Gebrauchsanweisung

da Flaskekurv
Brugsanvisning

hu Palacktartó kosár – használati útmutató

fr

nl Flessenrek
Gebruiksaanwijzing

es Botellero
Instrucciones de manejo

pt Cesto para garrafas
Instruções de utilização

it Cesto per bottiglie
Istruzioni d'uso

fi Pullovaunu
Käyttöohje

no flaskekurv
Bruksanvisning

sv Flaskkorg
Bruksanvisning

M.-Nr. 11 843 170

de 4

da 11

en 18

fr 25

nl 32

es 39

pt 46

it 53

fi 60

no 67

sv 74

hu – Tartalom

Szállítási terjedelem 18
APFD 210 18


Az APFD 210 áttekintése 19

Alkalmazástechnika 21
Az alsó szórókar eltávolítása a ProfiLine mosogatógépből 21
Az APFD 211 adapter behelyezése 21
Az alsó szórókar eltávolítása a frissvizes mosogatógépből 22
Az APFD 212 adapter behelyezése 22
A mosogatandó edények elrendezése 23

hu – Szállítási terjedelem

APFD 210


Palacktartó kosár

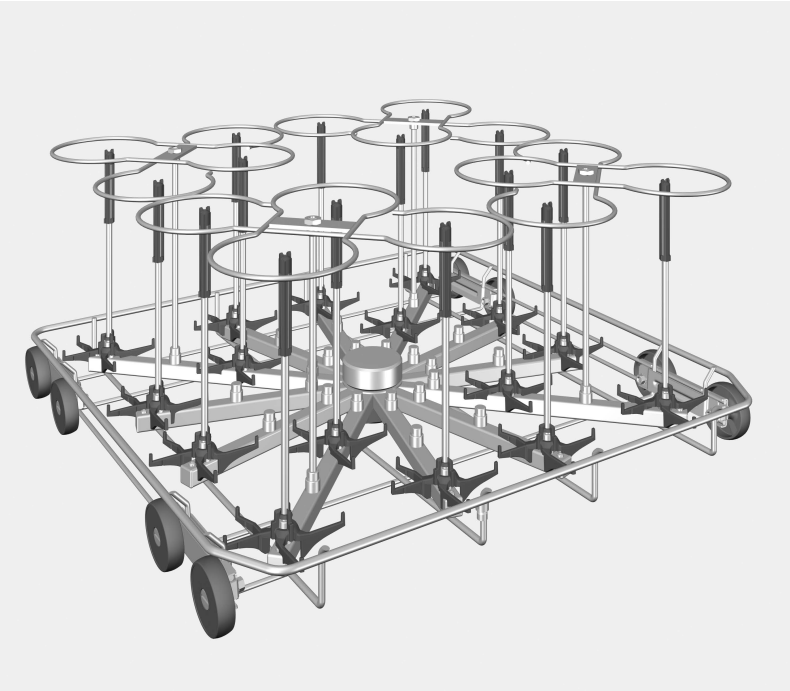

A palacktartó kosár a következő készülékekben használható:

ProfiLine mosogatógép (APFD 211 adapter)	Frissvizes mosogatógép (APFD 212 adapter)
PFD 101	PG 8055
PFD 102	PG 8056
PFD 103	PG 8057 TD
PFD 104	PG 8058
PG 8130	PG 8059
PG 8131	PG 8060
PG 8133	PG 8061
PG 8110	PG 8096
PG 8132	PG 8099

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

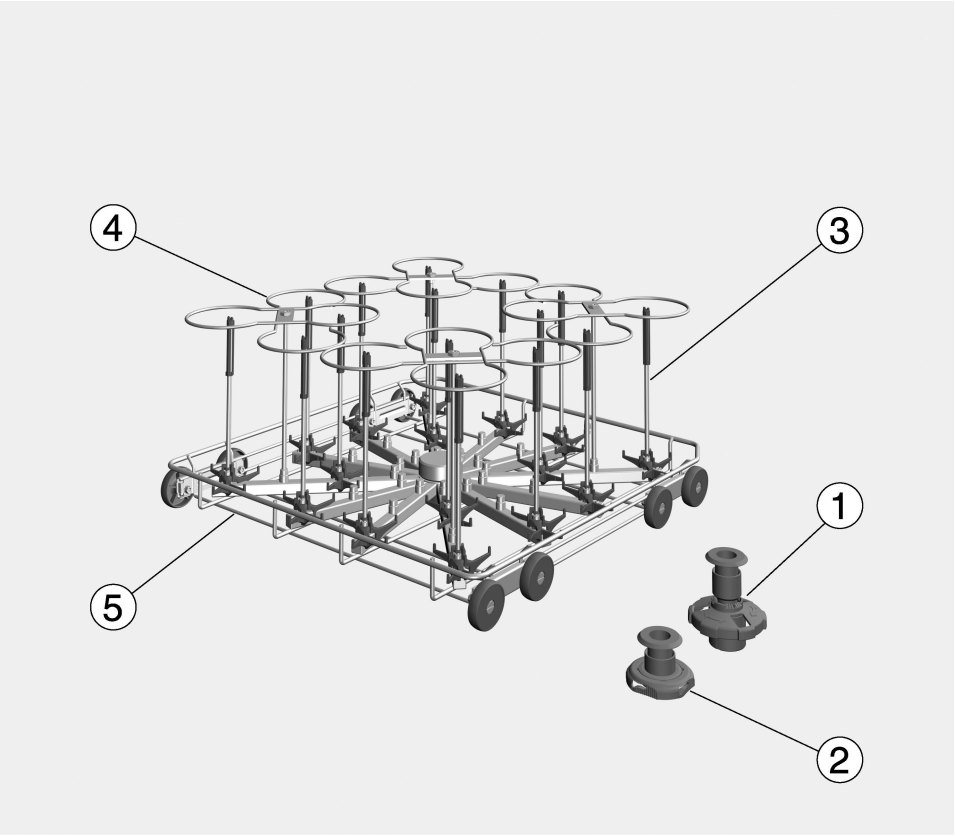

a APFD 211 ProfiLine mosogatógépekhez

(nem része a szállítási terjedelemnek) b APFD 212 frissvizes mosogatógépekhez

(nem része a szállítási terjedelemnek) c Injektorfúvóka

d Palacktartók

e Alsó kosár

hu – Az APFD 210 áttekintése

Méretek

Magasság	235.2 mm
Szélesség	251.2 mm
Mélység	515.5 mm
Max. fúvókaszám	16
Mosogatandó edények magassága, ProfiLine mosogatógép felső kosárral	255 mm ± 20 mm (felső kosár helyzete: alsó/középső/felső)
Mosogatandó edények magassága, frissvizes mosogatógép felső kosárral	225 mm/275 mm (felső kosár helyzete: alsó/felső)
Mosogatandó edények magassága, frissvizes mosogatógép felső kosár nélkül	500 mm
Palackátmérő	max. 95 mm
Palacknyak belső átmérője	min. 12 mm


Az alsó szórókar eltávolítása a ProfiLine mosogatógépből

Az APFD 211 adapter ProfiLine mosogatógép mosogatóterébe való behelyezése előtt el kell távolítani az alsó szórókart.

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.

Az alsó szórókar eltávolítása

- Vegye ki az alsó kosarat.
- Forgassa az alsó szórókar menetes részét az óramutató járásával ellentétesen, és húzza ki felfelé a szórókart a menetes résszel együtt a mosogatótérből.

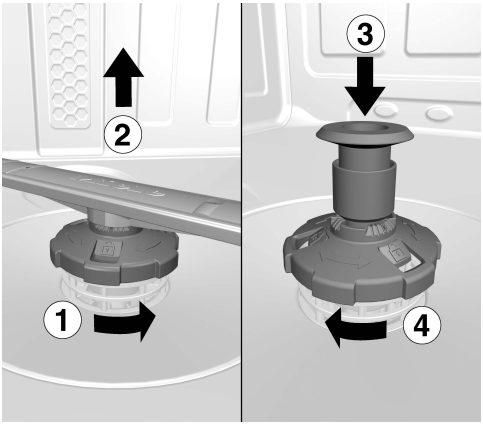

- Forgassa az adapter menetes részét az óramutató járásával megegyezően, amíg a kémlelőablakban lévő nyíl a lakat szimbólumra nem mutat.
- Ellenőrizze, hogy az adapter biztosan rögzül-e.

⚠ Károsodás a keringtető rendszerbe jutó szennyeződés miatt.

Az adapter a szűrőkombináció rögzítésére szolgál. Szűrők nélkül durva szennyeződés juthat a keringtető rendszerbe, és eltömődést okozhat.

Ne indítson mosogatóprogramot adapter vagy szűrők nélkül.

Az alsó szórókar fixen kapcsolódik a menetes részhez. Az adapter csak fixen rögzített menetes résszel helyezhető be.

Az APFD 211 adapter behelyezése

- Helyezze be az adaptert a menetes résszel, és ügyeljen arra, hogy a szűrőkombináció síkban feküdjön a mosogatótér alján.

hu – Alkalmazástechnika


Az alsó szórókar eltávolítása a frissvizes mosogatógépből

Az APFD 212 adapter frissvizes mosogatógép mosogatóterébe való behelyezése előtt el kell távolítani az alsó szórókart.

- Kapcsolja ki a mosogatógépet.

Az alsó szórókar eltávolítása

- Vegye ki az alsó kosarat.
- Forgassa az alsó szórókar menetes részét az óramutató járásával ellentétesen, és húzza ki felfelé a szórókart a menetes résszel együtt a mosogatótérből.

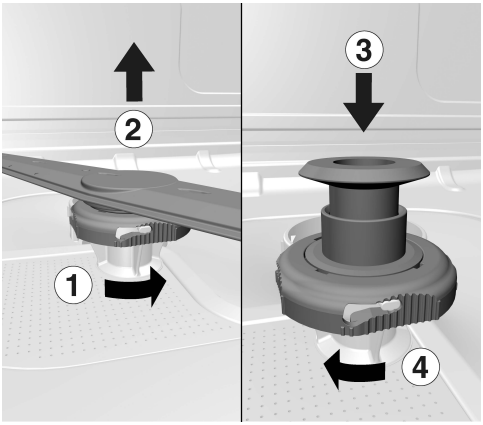

Az alsó szórókar fixen kapcsolódik a menetes részhez. Az adapter csak fixen rögzített menetes résszel helyezhető be.

Az APFD 212 adapter behelyezése

- Helyezze be az adaptert a menetes résszel, és ügyeljen arra, hogy a szűrőkombináció síkban feküdjön a mosogatótér alján.
- Forgassa az adapter menetes részét az óramutató járásával megegyezően, amíg a kémlelőablakban lévő nyíl a lakat szimbólumra nem mutat.
- Ellenőrizze, hogy az adapter biztosan rögzül-e.

⚠ Károsodás a keringtető rendszerbe jutó szennyeződés miatt.

Az adapter a szűrőkombináció rögzítésére szolgál. Szűrők nélkül durva szennyeződés juthat a keringtető rendszerbe, és eltömődést okozhat.

Ne indítson mosogatóprogramot adapter vagy szűrők nélkül.

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

A mosogatandó edények elrendezése

Távolítsa el a durva szennyeződéseket a mosogatandó edényekről.

Ellenőrizze, hogy a mosogatandó edények alkalmasak-e gépi tisztításra.

Megjegyzések

⚠ Savak és oldószerek okozta károsodás veszélye.

Sav- vagy oldószermaradványok, különösen sósav vagy kloridok, nem juthatnak a mosogatótérbe.

Ne használjon savat vagy oldószert a mosogatótérben.

⚠ Hamuval, homokkal, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett edények okozta károsodás.

Ezek a darabok károsítják a ProfiLine és frissvizes mosogatógépeket.

Hamuval, homokkal, viasszal, kenőzsírral vagy festékkel szennyezett darabokat ne mosogasson ProfiLine vagy frissvizes mosogatógépben.


Helyezze a palackokat a palacktartó kosár kijelölt helyeire.

Vegye figyelembe:

- Úgy helyezze be a palackokat, hogy a víz minden felületet elérjen.

A palacktartó kosárban 16 palacktartó van.

- A palackokat nyílásukkal lefelé helyezze az injektorfúvókákra.

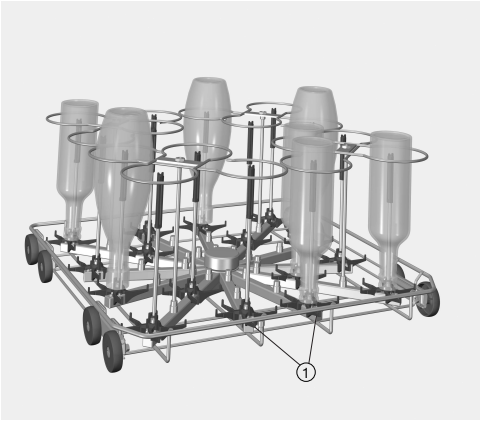

A palacktartó kosár és a tartók legfeljebb 95 mm átmérőjű palackokat fogadnak.

Egyszerre legfeljebb 16 palack tisztítható.

Nem kielégítő tisztítás

Az elöl lévő fúvókákra helyezett palackok magassága nem haladhatja meg a 200 mm-t.

Ha az összes tisztítandó palack 200 mm-nél magasabb, folyékonyszer-adagolás javasolt.

- Indítsa el a mosogatóprogramot.

Ajánlott mosogatóprogram: üvegáru

További információkat a használt mosogatógép használati útmutatója tartalmaz.