
Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

APFD 419

Az APFD 419 behelyezése az APFD 215 felső kosárba


Olvassa el a használati útmutatót is

A szállítási terjedelem két műanyag klipszet és egy kengyelt tartalmaz.

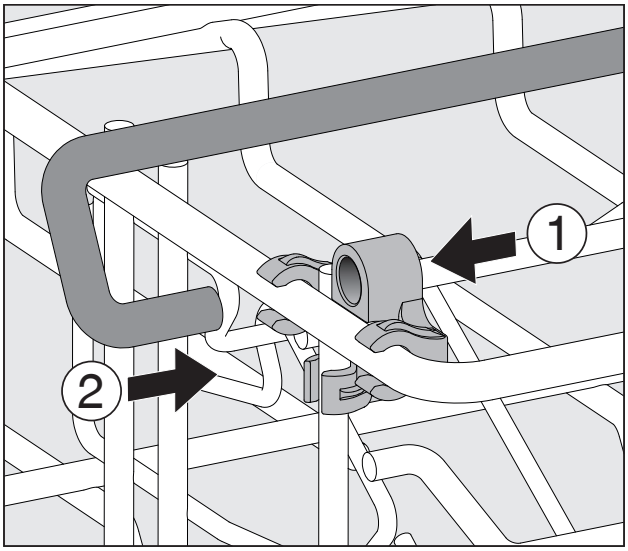

Az APFD 419 klipszének rögzítése a felső kosár hátoldalán

Az APFD 419 fedéltartó a felső kosár mindkét oldalára felszerelhető. Pattintson egy műanyag klipszet a felső kosár hátoldalára az ábra szerint, és tolja a kengyelt a tartóba.

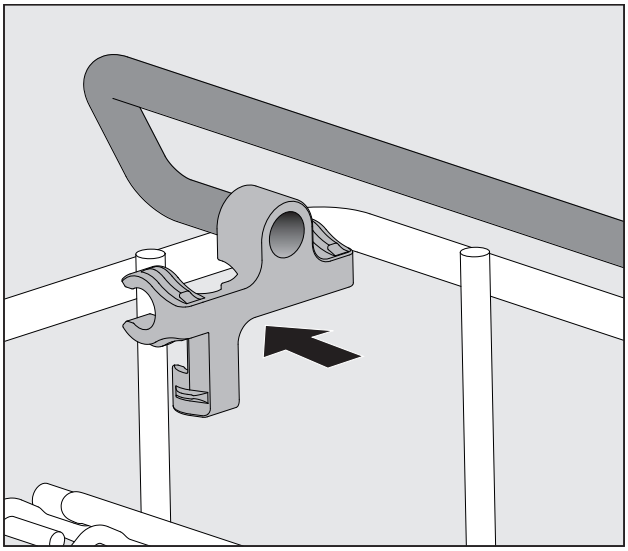

Az APFD 419 klipszének rögzítése a felső kosár elején

Tolja a második műanyag klipszet a kengyelre, és pattintsa fel a felső kosár elejére.

Kiadás dátuma: 2024-04-29

CE Miele & Cie. KG, Carl-Miele Straße 29,
33332 Gütersloh, Germany


12 683 130-00

Tájékoztató magyar fordítás a Miele angol nyelvű dokumentuma alapján – eltérés esetén az eredeti az irányadó.

APFD 419


Az APFD 419 behelyezése az APFD 215 felső kosárba

Olvassa el a használati útmutatót is

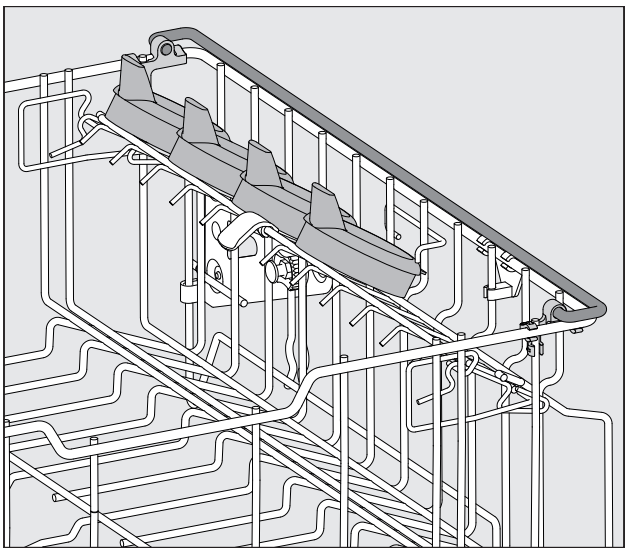

Az APFD 419 kengyele kifelé hajtva

Be- és kipakoláshoz hajtsa kifelé az APFD 419 kengyelét.

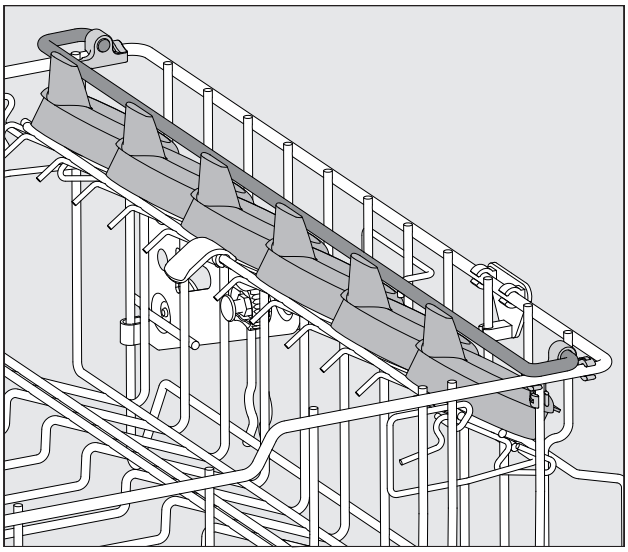

Kengyel befelé hajtva a mosogatandó edények rögzítéséhez

Bepakolás után hajtsa befelé a kengyelt, hogy rögzítse a mosogatandó edényeket.

Kiadás dátuma: 2024-04-29

Miele & Cie. KG, Carl-Miele Straße 29,
33332 Gütersloh, Germany

12 683 130-00